



heel^{up}[®]


förebygg trycksår

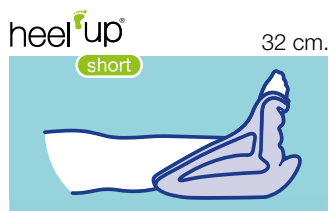

Artikelnr.: 53-100

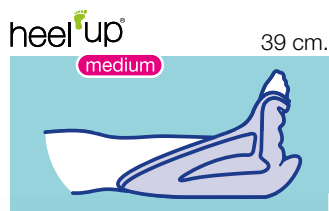

Artikelnr.: 53-101

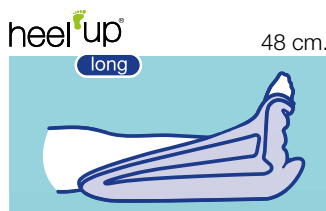

Artikelnr.: 53-102



www.gaterd.se

heel up[®] är Levabos nya hygieniska och miljövänliga produkter för enpatientsbruk.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande sårsköterskor, vilket säkerställer optimal komfort och hygien i behandling och förebyggning av trycksår.

heel up[®] är användbar för effektiv förebyggning och behandling av trycksår på hälar.

heel up[®] är brukarspecifika produkter för enpatientsbruk i ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet är tillverkat av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsorberande nonwoven material som gör heel up behaglig direkt mot huden.

Enkel hantering. heel up[®] blåses upp innan användning och justeras till varje enskild användares anatomi och behov.

heel up[®] har en indikator för korrekt fyllnadsnivå.

heel up[®] har följande fördelar:

- Produkter för enpatientsbruk som säkerställer god hygien och motverkar smittspridning.
- heel up[®] är designad för behandling och förebyggning av trycksår i hälsregionen.
- Lätt och enkel att använda.
- heel up[®] har en indikator för korrekt fyllnadsnivå.
- God komfort.
- Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och värmetransporterande material.
- Platsbesparande.
- Levereras i ren, förseglad platt förpackning inkl. uppblåsningsanordning.
- Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010 (test för irritation och hudkänslighet)
- Finns i era olika storlekar

all up®

förebygg trycksår




all up®
universal 50 x 50 cm.




Artikelnr.: 53-109

all up®
multi small 50 x 25 cm.

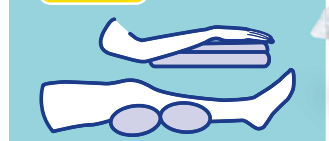

Artikelnr.: 53-103

all up®
multi medium 50 x 37 cm.

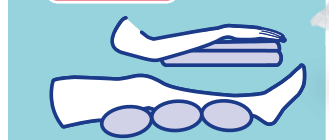


Artikelnr.: 53-104

all up®
multi large 50 x 50 cm.



Artikelnr.: 53-105

all up®
head 28 x 30 cm.

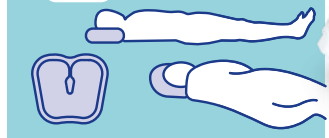

Artikelnr.: 53-106

all up®
back & seat 40 x 24 cm.




Artikelnr.: 53-107

all up®
seat 42 x 42 cm.



Artikelnr.: 53-108

all up®
wing 85 x 43 cm.

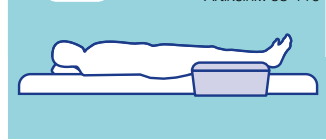

Artikelnr.: 53-110

www.gaterd.se

all up® är Levabos nya hygieniska och miljövänliga produkter för enpatientsbruk.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande sårsköterskor, vilket säkerställer optimal komfort och hygien i behandling och förebyggning av trycksår.

all up® är användbar för effektiv förebyggning och behandling av trycksår på de mest utsatta ställen som exempelvis häls, höft, armbåge, axel, rygg m.m.

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma produkt kan användas i olika avlastningssituationer, så att trycksårförebyggning och behandling utförs optimalt.

all up® är brukarspecifika produkter för enpatientsbruk i ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet är tillverkat av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsorberande nonwoven material som gör heel up behaglig direkt mot huden.


Enkel hantering. all up® blåses upp innan användning och justeras till varje enskild användares anatomi och behov.

all up® har följande fördelar:

- Produkter för enpatientsbruk som säkerställer god hygien och motverkar smittspridning.
- all up® är designad för behandling och förebyggning av trycksår på armbågar, axlar, rygg m.m.
- Lätt och enkel att använda.
- God komfort.
- Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och värmetransporterande material.
- Platsbesparande.
- Levereras i ren, förseglad platt förpackning inkl. uppblåsningsanordning.
- Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010 (test för irritation och hudkänslighet)
- Finns i era olika storlekar

Gate Rehab Development AB
Tel: 0371-31800
Fax: 0371-31801
Industrigatan 2/Box 2
33021 Reftele
info@gaterd.se
www.gaterd.se

GATE
REHAB DEVELOPMENT AB

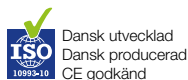

förebygg trycksår

Med de unika produkterna från Gate förebyggs och behandlas trycksår enkelt och hygieniskt.

long
48 cm.
Artikelnr.: 53-102

medium
39 cm.
Artikelnr.: 53-101


short
32 cm.
Artikelnr.: 53-100

heel^{up}[®]



all^{up}[®]

all^{up}[®]
head 28 x 30 cm.

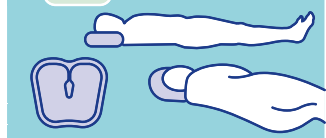

Artikelnr.: 53-106

all^{up}[®]
universal 50 x 50 cm.



Artikelnr.: 53-109




all^{up}[®]
back & seat 40 x 24 cm.



Artikelnr.: 53-107

all^{up}[®]
wing 85 x 43 cm.

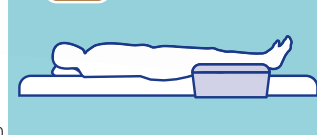

Artikelnr.: 53-110

www.gaterd.se

heel up[®] och all up[®] är Levabos nya hygieniska och miljövänliga uppblåsbara produkter för enpatientsbruk.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande sårsköterskor, vilket säkerställer optimal komfort och hygien i behandling och förebyggnad av trycksår.

heel up[®] och all up[®] är användbara för effektiv förebyggnad och behandling av trycksår på de mest utsatta ställen som exempelvis häls, höft, armbåge, axel, rygg m.m.

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma produkt kan användas i olika avlastningssituationer, så att trycksårspåbygggnad och behandling utförs optimalt.

heel up[®] och all up[®] är brukarspecifika produkter för enpatientsbruk i ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet är tillverkat av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsorberande nonwoven material som gör heel up[®] och all up[®] behagliga direkt mot huden.

Enkel hantering. heel up[®] och all up[®] blåses upp innan användning och justeras till varje enskild användares anatomi och behov.

heel up[®] och all up[®] har följande fördelar:

- Produkter för enpatientsbruk som säkerställer god hygien och motverkar smittspridning.
- heel up[®] är användbar för effektiv förebyggnad och behandling av trycksår på häls.
- all up[®] är användbar för effektiv förebyggnad och behandling av trycksår på de mest utsatta ställen som exempelvis häls, höft, armbåge, axel, rygg m.m.
- Lätt och enkelt att använda.
- God komfort.
- Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och värmetransporterande material.
- Platsbesparande.
- Levereras i ren, förseglad platt förpackning inkl. uppblåsningsanordning.
- Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010 (test för irritation och hudkänslighet)
- Finns i era olika storlekar

Pump översikt 2014

Elektrisk pump
Med röd sjukhusladd
Artikelnr.: 53-124



Elektrisk pump
Med vanlig sladd
Artikelnr.: 53-121



Batteripump
Artikelnr.: 53-122



Manuell pump
Artikelnr.: 53-120



 Dansk utvecklad
Dansk producerad
CE godkänd

heel up[®] & all up[®] Pat. Pending. Utvecklad och producerad i Danmark av Levabo ApS. Produkterna är CE godkända. Rätt till ändringar förbehålles.

Gate Rehab Development AB
Tel: 0371-31800
Fax: 0371-31801
Industrigatan 2/Box 2
33021 Reftele
info@gaterd.se
www.gaterd.se


GATE
REHAB DEVELOPMENT AB

så här fyller du produkten



1

Sätt i adapter i ventilöppning. Vrid och pressa ned adaptern i ventilen tills den sitter fast. Pressa endast adapters yttersta "rör" ned i ventilen!

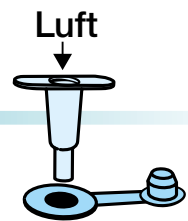


2

Pumpa upp kudden till 3/4.

3


För bort adaptern ur ventilen genom att hålla emot ventilen med två fingrar, som visat på bilden.

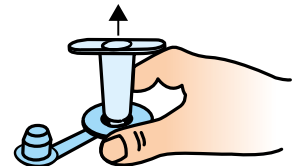

4

Ta ur luft till lagom höjd med adaptern.

VIKTIGT! Kudden får inte vara för hårt uppumpad. Den måste vara mjuk och eftergivande för optimal positionering.

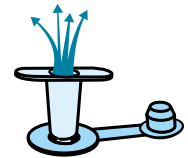

5

Stäng ventilen.



www.gaterd.se

