

The logo for APEX, featuring the word "APEX" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a red dot above it. The background of the entire page is a low-angle shot of a modern building's facade with a grid of windows, set against a clear blue sky. The right side of the image is partially obscured by a dark teal vertical bar.

**APEX**

**Pro-CARE Auto**

# Pro-CARE Auto

Pro-CARE Auto är ett självinställande växlande madrasssystem som automatiskt anpassar sig till den mest optimala tryckinställningen för patienten. Detta minimerar hanteringen samtidigt som patientsäkerheten ökar. Madrassen har en "cell-on-cell" konstruktion vilket innebär att den nedre delen av varje luftcell alltid är luftfylld och fungerar som en bottenmadrass. Detta ger en ökad säkerhet vid transport och strömbrott. Produkten är lämplig att använda i alla typer av vårdmiljöer, förebyggande och behandlande till och med sårkategori 4.



## ■ Maxtryck/Omvårdnadsläge

Kan användas i omvårdnadssituationer såsom lägesändringar eller vid omvårdnad. Återgår automatiskt till växlande läge efter 20 minuter.

## ■ Växlande läge

Systemet kan ställas in på växeltrycks-behandling med en cykeltid på 10minuter.

## Programval (Systemet arbetar oavsett val självinställande/automatiskt)



## ■ Statiskt läge

Ger en stabil yta med lägre tryck än det växlande läget. Lämplig att använda vid insomning, återgår automatiskt till växlande läge efter 20 minuter.



## ■ Sittfunktion + Växlande läge

Ger möjlighet för ökat stöd och stabilitet vid upprätt sittande.



## ■ Sittfunktion + Statiskt läge

Ger möjlighet för ökat stöd och stabilitet vid upprätt sittande. Återgår automatiskt till växlande läge efter 20 minuter.



## ■ Integrerad hälavlastning

De fem nedersta cellerna i madrassen kan individuellt kopplas ur, beroende på patientens längd, för att helt eliminera trycket på hällarna.


## Specifikationer

|                    | Modell             | Pro-CARE Auto                    |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Pump               | Storlek            | 29,1 x 20x11,7cm                 |
|                    | Vikt               | 2,2kg                            |
|                    | Höljets material   | Brandhämmande ABS                |
|                    | Matningsspänning   | AC 220-240V, 50Hz; AC 120V/ 60Hz |
|                    | Intervall/Cykeltid | 10 minuter                       |
| Ersättningsmadrass | Storlek            | 200 x 80/85/90/105/120 x 20cm    |
|                    | Celler             | 20 x 20 cm höga celler           |
|                    | Vikt               | 7-9kg (beroende på storlek)      |
|                    | Överdrag           | PU / 2-vägs stretch              |
|                    | Cellmaterial       | Nylon/TPU                        |
|                    | Brukarvikt         | 0-200kg                          |



| Art.nr | Modell               |
|--------|----------------------|
| 54-110 | Pro-CARE Auto 80 cm  |
| 54-111 | Pro-CARE Auto 85 cm  |
| 54-112 | Pro-CARE Auto 90 cm  |
| 54-113 | Pro-CARE Auto 105 cm |
| 54-114 | Pro-CARE Auto 120 cm |

*Pro-CARE Auto ersättningsmadrass  
Patient: 176 cm/82 kg*

Tryckkarta 1

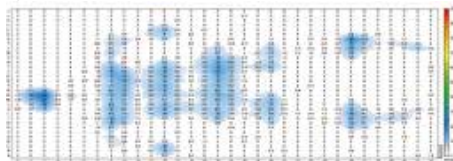

Tryckkarta 2

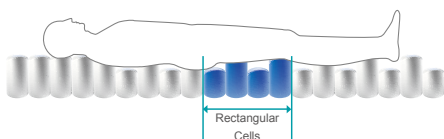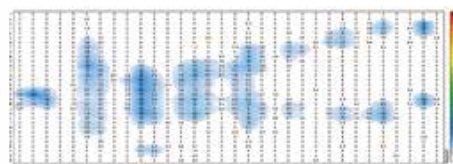

### ■ Rektangulära luftceller

De rektangulära cellerna följer bättre kroppens konturer, rörelser och reducerar skjuvkrfter. Ger ett bättre stöd vid sittande.

**Pyo-CARE series** Therapeutic Support Surface



# APEX MEDICAL CORP.

[www.apexmedicalcorp.com](http://www.apexmedicalcorp.com)

## HEADQUARTERS

APEX MEDICAL CORP.

No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei City, 23679, Taiwan

TEL:+886 2 2268 3100

FAX:+886 2 2268 6525

[marketing@apexmedical.com.tw](mailto:marketing@apexmedical.com.tw)

## EUROPE

APEX MEDICAL S.L.

Elcano 9, 6ª planta 48008 Bilbao, Vizcaya, Spain

TEL:+34 94 4706408

FAX:+34 94 4706409

[info@apexmedical.es](mailto:info@apexmedical.es)

## UK

APEX MEDICAL LIMITED

Atlantic House, Imperial Way Reading

Berkshire RG2 0TD, United Kingdom

TEL:+44(0)118 9908 049

FAX:+44(0)118 9036 100

[sales@apexmedical.org.uk](mailto:sales@apexmedical.org.uk)

## MIDDLE EAST • AFRICA • INDIA

29, Misr Liltameer Building, Stree#10, AREA#8, Sheraton Building,

Heliopolis Cairo, Egypt.

TEL:+202 2 2671303

FAX:+202 2 2678649

[sunmed@link.net](mailto:sunmed@link.net)

## USA

APEX MEDICAL USA CORP.

615 N. Berry St. Suite D, Brea, CA 92821, USA

TEL: +1 714 671 3818

FAX: +1 714 671 9040

[sales.usa@apexmedicalcorp.com](mailto:sales.usa@apexmedicalcorp.com)

## CHINA

APEX MEDICAL (KUNSHAN) CORP.

No. 1368, ZiZhu Road, Kunshan,

Jiang Su Province, China

TEL:+86 512 8617 1660 Ext1150

FAX:+86 512 8617 8663

[customer@apexmedical.com.cn](mailto:customer@apexmedical.com.cn)

## Återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00

Gate Rehab Development AB

Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele

[info@gaterd.se](mailto:info@gaterd.se) | [www.gaterd.se](http://www.gaterd.se)



DIN PARTNER I VÅRDEN