

The logo for APEX, featuring the word "APEX" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a red dot above it. The background of the entire page is a low-angle shot of a building's facade with many windows, set against a clear blue sky. The image is framed by a dark teal border on the right and bottom.

APEX

Pro-CARE Auto+

Pro-CARE Auto+

Pro-CARE Auto+ är ett självinställande madrasssystem som automatiskt anpassar sig efter brukarens vikt, läge och position. Madrassen kan användas med växlande tryck eller med statiskt lågt tryck. Madrassen har en "cell-on-cell" konstruktion vilket innebär att den nedre delen av varje luftcell alltid är luftfylld och fungerar som en bottenmadrass. Detta ger en ökad säkerhet vid transport och strömavbrott. Madrassen levereras med ett mjukt och följsamt överdrag vilket minskar risken för glidtryck. Produkten är lämplig att använda i alla typer av vårdmiljöer och är förebyggande och behandlande till och med sårkatergori 4.

Programval



■ Växlande läge

Systemet kan ställas in på växeltrycks-behandling med en cykeltid på 10 minuter.

■ Statiskt läge

Ger en stabil yta med samma lufttryck i alla celler.




■ Maxtryck/Omvårdnadsläge

Kan användas i omvårdnadssituationer såsom lägesändringar eller vid omvårdnad. Återgår automatiskt till föregående inställning efter 20 minuter.

■ Integrerad hälavlastning

De fem nedersta cellerna i madrassen kan individuellt kopplas ur, beroende på patientens längd, för att helt eliminera trycket på hämlarna.

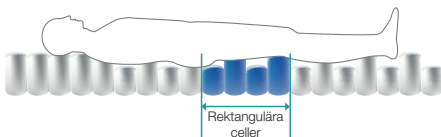

■ Rektangulära luftceller

De rektangulära cellerna följer bättre kroppens konturer, rörelser och reducerar skjuvkrafter. Ger ett bättre stöd vid sittande och underlättar vid mobilisering.

Specifikationer

	Modell	Pro-CARE Auto+
Pump	Storlek	29,1 x20x11,7 cm
	Vikt	2,2 kg
	Höljets material	Brandhämmande ABS
	Matningsspänning	AC 220-240V, 50Hz; AC 120V/ 60Hz
	Intervall/Cykeltid	10 minuter
Ersättningsmadrass	Storlek	200 x 80/85/90/105/120 x 20 cm
	Celler	20 x 20 cm höga celler
	Vikt	7-9 kg (beroende på storlek)
	Överdrag	PU / 2-vägs stretch
	Cellmaterial	Nylon/TPU
	Brukarvikt	0-230 kg

Art.nr Modell

54-349 Pro-CARE Auto+ 80 x 200 cm

54-350 Pro-CARE Auto+ 85 x 200 cm

54-351 Pro-CARE Auto+ 90 x 200 cm


54-352 Pro-CARE Auto+ 105 x 200 cm

54-353 Pro-CARE Auto+ 120 x 200 cm


Vid behov av andra storlekar kontakta oss för mer information.

Pro-CARE Auto+ ersättningsmadrass Patient: 176 cm/82 kg


Tryckkarta 1

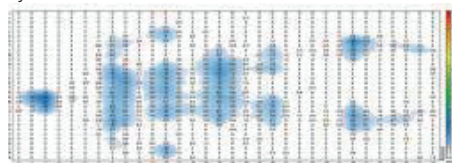

Tryckkarta 2

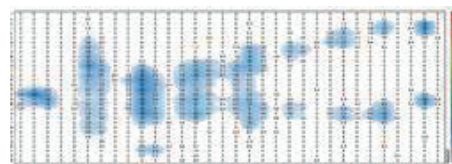

Pyo-CARE series Therapeutic Support Surface

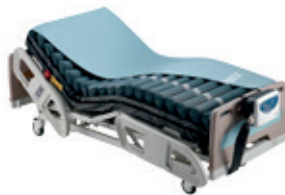

APEX MEDICAL CORP.

www.apexmedicalcorp.com

HEADQUARTERS

APEX MEDICAL CORP.

No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei City, 23679, Taiwan

TEL:+886 2 2268 3100

FAX:+886 2 2268 6525

marketing@apexmedical.com.tw

EUROPE

APEX MEDICAL S.L.

Elcano 9, 6^a planta 48008 Bilbao, Vizcaya, Spain

TEL:+34 94 4706408

FAX:+34 94 4706409

info@apexmedical.es

UK

APEX MEDICAL LIMITED

Atlantic House, Imperial Way Reading

Berkshire RG2 0TD, United Kingdom

TEL:+44(0)118 9908 049

FAX:+44(0)118 9036 100

sales@apexmedical.org.uk

MIDDLE EAST • AFRICA • INDIA

29, Misr Liltameer Building, Stree#10, AREA#8, Sheraton Building,

Heliopolis Cairo, Egypt.

TEL:+202 2 2671303

FAX:+202 2 2678649

sunmed@link.net

USA

APEX MEDICAL USA CORP.

615 N. Berry St. Suite D, Brea, CA 92821, USA

TEL: +1 714 671 3818

FAX: +1 714 671 9040

sales.usa@apexmedicalcorp.com

CHINA

APEX MEDICAL (KUNSHAN) CORP.

No. 1368, ZiZhu Road, Kunshan,

Jiang Su Province, China

TEL:+86 512 8617 1660 Ext1150

FAX:+86 512 8617 8663

customer@apexmedical.com.cn

Återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00

Gate Rehab Development AB

Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele

info@gaterd.se | www.gaterd.se

GATE

WE DO BETTER.